

# Presso MK 400


Ce produit est un système thérapeutique à air comprimé pour la circulation sanguine du corps humain. Il y a 3 programmes standards possibles, et la possibilité pour chaque programme d'inverser le flux (appel à résorption) et de sélectionner les cellules à gonfler.

L'air est réparti dans 6 cellules, à pression séquentielle de la cellule 1 à la cellule 6, pour une circulation sanguine de bas en haut.

Ne pas se servir de cet appareil avec des pressions élevées en début de traitement, il faut commencer au maximum avec un niveau bas et par la suite augmenter progressivement. La pression tient compte de l'épaisseur du bras ou de la jambe, pour contrôler le niveau de pression, l'utilisateur peut se référer au sélecteur de pression.

Ce matériel est un appareil médical destiné au traitement de la circulation sanguine et doit donc être utilisé par du personnel médical qualifié et compétent.

## Bouton de fonction

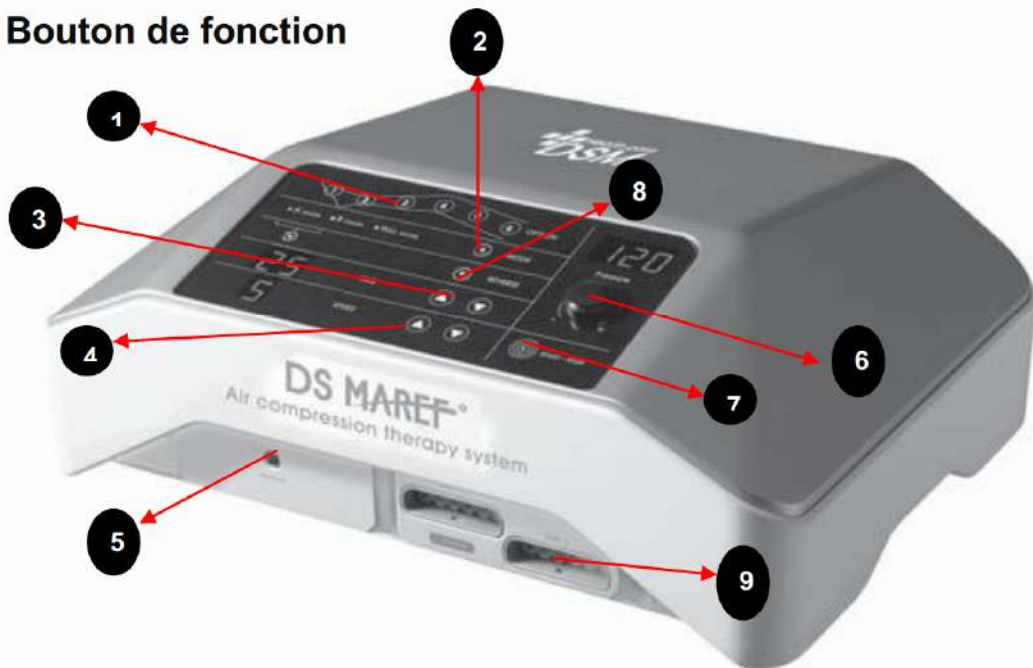

1	SOINS OPTIONNELS	6	PRESSION
2	PROGRAMMES	7	START/STOP
3	TEMPS	8	INVERSION
4	VITESSE	9	CONNEXION
5	ARRÊT D'URGENCE		



A-BOTTES



B-CEINTURE



C-MANCHON



D-ELARGISSEURS

